



PROTOCOLE DE LA DILUTION

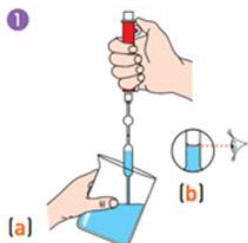


Etape 1 : Prélever dans un bécher, à l'aide d'une pipette jaugée munie d'une propipette un volume $V_{\text{mère}}$ de solution mère.

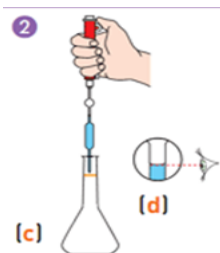

Etape 2 : Verser la solution prélevée dans la fiole jaugée de volume V_{fille} .



Etape 3 : Remplir la fiole au 2/3 avec de l'eau distillée. Boucher la fiole jaugée ; **agiter**.

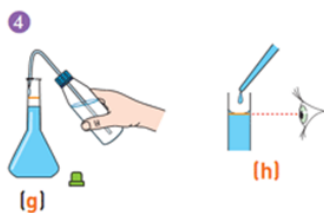

Etape 4 : Compléter la fiole avec de l'eau distillée, jusqu'au trait de jauge.

(Le bas du ménisque doit être au niveau du trait de jauge. Il est possible d'ajouter aux gouttes à gouttes le solvant avec une pipette Pasteur.) **Boucher et homogénéiser la solution.**