



PROTOCOLE DE LA DISSOLUTION




Etape 1 : Placer une coupelle sur le plateau d'une balance électronique et effectuer la tare. Peser précisément la masse de soluté en le prélevant avec une spatule propre et sèche.

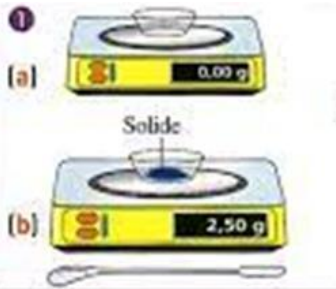

Etape 2 : Introduire le soluté dans la fiole jaugée. (Rincer la coupelle à l'aide d'une pissette d'eau distillée au-dessus de la fiole jaugée afin de récupérer tout le soluté.)

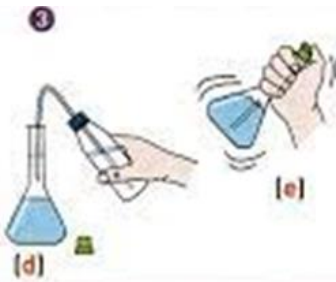

Etape 3 : Remplir la fiole au 2/3 avec de l'eau distillée. Boucher la fiole jaugée ; agiter jusqu'à dissolution totale du soluté.

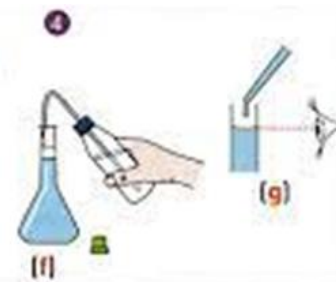

Etape 4 : Compléter la fiole avec de l'eau distillée, jusqu'au trait de jauge.

(Le bas du ménisque doit être au niveau du trait de jauge. Il est possible d'ajouter aux gouttes à gouttes le solvant avec une pipette Pasteur.)

Boucher et homogénéiser la solution.